

HemoCue® Hb 201+ System



Standarden för optimal noggrannhet

Med resultat av laboratorie kvalitet och enkelt handhavande har HemoCue® Hb 201+ System blivit en standard för patientnära Hb-testning. Vårdgivare runt om i världen erhåller pålitliga resultat och svar direkt vilket gör att de kan fatta rätt beslut när det behövs som mest – patientnära.

HemoCue har mer än 40 års erfarenhet av hängiven support och service samt unika utbildningar, vilket gör att du alltid kan räkna med att HemoCue har de rätta lösningarna för alla dina behov.

Noggrannhet börjar med oss

Lita på dina patientnära resultat

- ▶ Fabrikskalibrerad mot ICSH referensmetod
- ▶ Mikrokuvett-teknologi med utmärkt lot-till-lot-reproducerbarhet
- ▶ Möjlighet att lagra upp till 600 resultat med datum och tid
- ▶ Blodbaserad vätskekontroll finns tillgänglig


Enkel tillgång till noggrannhet med laboratorie kvalitet

- ▶ Kapillära, venösa eller arteriella helblodsprover
- ▶ Enkel att använda
- ▶ Minimalt underhåll av systemet
- ▶ Elektronisk överföring av testresultat till journalsystem/LIS


För mer information om HemoCue Hb 201+ System, besök hemocue.com

HemoCue® Hb 201+ System


Princip	En modifierad azidmethemoglobin reaktion, två våglängder (570 nm och 880 nm) för att kompensera för turbiditet
Kalibrering	Fabrikskalibrerad mot ICSH referensmetod, ingen ytterligare kalibrering krävs
Provmaterial	Kapillära, venösa eller arteriella helblodsprover
Provvolyum	~10 µL
Mätområde	5-256 g/L
Mättid	Resultat inom 60 sekunder
Arbetstemperatur	15-30 °C
Förvaringstemperatur	Instrument: 0-50 °C Mikrokuvetter: 15-30 °C
Kvalitetskontroll	Inbyggd självttest Blodbaserad vätskekontroll finns tillgänglig (bovint)
Data Management	Möjlighet för inmatning av patient-ID, användar-ID och andra parametrar för ökad spårbarhet
Connectivity/ Uppkoppling	Skrivare och HemoCue® Basic Connect inklusive valfri streckkodsläsare. Dataöverföring med Bluetooth® är möjligt via HemoCue® BT Connect (tillbehör)
Tillbehör	Termoskrivare Streckkodsläsare (anslutning till PC)
Strömförsörjning	Nätadapter eller 4 AA batterier
Mått	160 x 85 x 43 mm

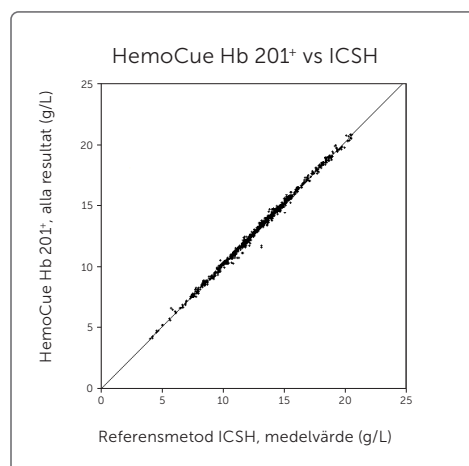

Tre enkla steg

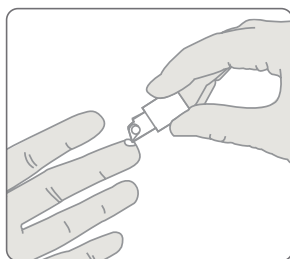

1 Fyll mikrokuvetten

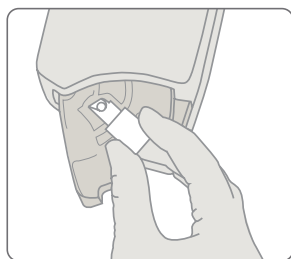

2 Placera mikrokuvetten i instrumentet



3 Läs av resultatet

HemoCue AB | Box 1204 | SE-262 23 Ängelholm | Sverige
Tel: 077 570 02 10 | info@hemocue.se

HemoCue har varit ledande inom patientnära diagnostik i mer än 40 år. Vi är specialiserade på att tillhandahålla tester till sjukvården med samma precision och noggrannhet som erhålls på kliniskt kemiska laboratorier.

